

Gebrauchsanleitung - Handgelenksbandage


Catell empfiehlt, das Produkt durch einen lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Gesundheitsfachmann anpassen zu lassen. Nutzer mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder eingeschränkter Durchblutung müssen besonders vorsichtig sein und beim Tragen der Bandage besonders auf Einklemmen, Aufscheuern und Schwellungen achten. Überprüfen Sie immer den unten aufgeführten Inhalt. Wenden Sie sich an den verschreibenden Arzt oder Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

Anwendungsgebiet

Die Bandage stützt die Hand, das Handgelenk und den Unterarm nach Verletzungen, Operationen, bei chronischen Schmerzen, Osteoarthritis und Überanstrengung. Die Bandage kann auch zu präventiven Zwecken bei starken oder repetitiven Bewegungen verwendet werden.

Anwendung

1. Wenn die Bandage ein Stützstäbchen hat, nehmen Sie dies aus der entsprechenden Tasche heraus und biegen Sie es in die den Bedürfnissen des Nutzers passenden Form und Abwinkelung. Schieben Sie es wieder in die Stäbchentasche. Das Stützstäbchen muss zur Handfläche hin gebogen eingesetzt werden. Abbildung 1
2. Öffnen Sie alle Haken- und Schlaufenriemen und schließen Sie den Daumenriemen. Legen Sie Ihre Hand wie in Abbildung 2 oder 4 dargestellt in die Bandage.
3. Schließen Sie alle Haken- und Schlaufenriemen und passen Sie sie so an, dass die Bandage bequem sitzt. Abbildung 3 oder 5

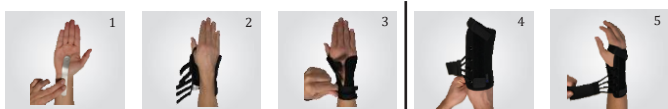

Schneiden Sie für ein saubereres und ordentlicheres Aussehen überschüssige Haken- und Schlaufenriemen ab. Passen Sie die Haken- und Schlaufenriemen bei Bedarf an. Es ist wichtig, dass die Bandage angenehm und ohne Einklemmen, Scheuern oder Störung der Durchblutung sitzt.

Material

Strong: Nylon, Elasthan. **Stabil:** Baumwolle, Polyester, Elasthan. **Comfort:** Baumwolle, Polyamid, Polyester, Elasthan. **Neopren:** synthetisches Gummi, Polyester, Polyamid. **Soft:** Polyester, Viskose, Elasthan, Nylon. Latexfrei.

Waschhinweise

Schließen Sie den Haken- und die Schlaufenriemen und entfernen Sie das Stützstäbchen, sofern vorhanden, aus der entsprechenden Tasche. Befolgen Sie die folgenden Waschhinweise: Verwenden Sie ein Wäschenetz. Lassen Sie die Bandage abtropfen.



Größe

Größe	*Abmessungen	Größe	*Abmessungen	Größe	*Abmessungen
XXS	10 - 12 cm	M	16 - 18 cm	XL	20 - 22 cm
XS	12 - 14 cm	L	18 - 20 cm	XXL	22 - 24 cm
S	14 - 16 cm				

*Messen Sie den Handgelenksumfang. Die Maßangaben sind als Leitlinie zu sehen.

Für den Gebrauch durch einen Patienten. Wenn das Produkt Neopren enthält, wird eine maximale Tragedauer von 4 Stunden am Stück empfohlen.

Recycling

Wenn das Produkt über ein herausnehmbares Stützstäbchen verfügt, entfernen Sie es und entsorgen Sie die Bandage gemäß den lokalen Bestimmungen.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 2017:745, Produktklasse 1.