

SILIPOS®

Engineered to Cushion and Protect™



Silipos Holding LLC
7049 Williams Road
Niagara Falls, NY 14304
1-800-229-4404
Made in USA
www.silipos.com



WMDE b.v.
Bergerweg 18
6085 AT Horn
Holland



WMDE UK Ltd.
The New Barn Mill Lane
Eastry, Sandwich, England
CT13 0JW

© Silipos Holding, LLC

(LT) Lietuviškai

Pirštų Juostelėyra vienpusė ištisinė raminančio ir drėkinančio gelio juosta kuri apsaugo nuo odos įtrūkimų ir trinimosi. Pirštų juostelė yra maždaug 24 pėdų ilgio ir ją galima apkirpti Jūsų pageidaujamui dydžiui.

PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS Plauti rankomis. Džiovinkite natūraliai. 20 valandų nešiojimas.

[SPĖJIMAI] Jeigu sergate cukriniu diabetu arba sutrikusia kraujotaka, pasikonsultuokite su gydytoju prieš šio produkto naudojimą. Nedelsiant nustokite naudoti šį produktą jeigu jaučiate skausmą, nutirpimą, pastebėjote spalvos pasikeitimą arba odos dirginimą. Jei šie simptomai tęsiasi, pasikonsultuokite su medicinos specialistu. Nenaudokite ant atvirų žaizdų. Laikykite vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Be latekso ir "pagaminti be natūralios latekso gumos", mažos detalės, užspringimo grėsmė. Apie bet kokią su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

(MT) bil-Malti

DigiStrip hija strixxa kontinwa ta' ġel li jtaffi l-uġigh u jipprovd i dratazzjoni fuq naha wahda, li tipproteġi waqt li tipprovd i serhan minn forzi ta'-ghafis u li jorborku. Digistrrips huma madwar 24" twal u jistghu jinqatghu ghad-daqs preferut.

KURA U UŻU Ahsel bl-Idejn. Halliġ jinxef b'mod naturali. 20 siegha ta' użu.

TWISSJIJET Jekk ghandek id-dijabete jew ċirkolazzjoni hażina, Ikkonsulta lit-tabib tieghek qabel tuża dan il-prodott. Jekk ikollok Uġigh, tnemnim, tibdil fil-kulur, jew irritazzjonijiet, waqqaf l-użu immedjatament. Jekk is-sintomi jipersistu, ikkonsulta professjonist mediku. Tpoġġix il-prodott fuq feriti miftuħa. Żomm fejn ma jintlahaqx mit-ftal u mill-annimali domestiċi. Hieles mill-Latex & "Mħux magħmul minn latex ta'-lastiku naturali" periklu li wieħed jiġfa kkważat minn partijiet żġhar. Kwalunkwe incident serju li sehh f'konnessjoni mal-apparat għandu jiġi rappurtat lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti ta'-l-stat Membru li fih huwa stabbilit l-utent u/jew il-pazjent.

(PL) Polski

Tuba na palec to ciągły pasek kojącego i nawilżającego żelu, który z jednej strony amortyzuje i chroni, jednocześnie zapewniając ulgę od sił ścinających i ścierających. Tuba na palec ma długość ok. 60 cm i może być docięta do pożądanego rozmiaru.

PIELĘGNACJA I STOSOWANIE Prac ręcznie. Suszyć na powietrzu. 20 godzin użytkowania.

OSTRZEŻENIA W przypadku cukrzycy lub słabego krążenia, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się lekarzem W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, przebarwień lub podrażnień, należy natychmiast przerwać stosowanie. Jeżeli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie umieszczać produktu na otwartych ranach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Bez lateksu oraz "Wyprodukowano bez użycia naturalnego lateksu" ryzyko zadławienia małymi częściami. Każdy poważny incydent, którego wystąpienie ma związek z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

(PT) Português

A **DigiStrip** é uma tira contínua com gel suavizante e hidratante numa das almofadas laterais e que protege enquanto proporciona alívio das forças abrasivas e de deslizamento. As tiras DigiStrip têm aproximadamente 24" (61 cm) de comprimento e podem ser cortadas no tamanho preferido.

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO Lavagem das mãos. Secagem ao ar livre. 20h de utilização.

AVISOS Se tiver diabetes ou má circulação, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Se ocorrer dor, dormência, descoloração ou irritações, interromper imediatamente a utilização. Se os sintomas persistirem, consultar um profissional médico. Não colocar o produto sobre feridas abertas. Manter fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Sem látex e "Não fabricado com látex de borracha natural" Risco de asfixia de pequena parte. Qualquer incidente grave que decorra da utilização do dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

(RO) Românește

DigiStrip (Bandă pentru degete) este o bandă continuă cu gel liniștitor și hidratant pe o parte, care atenuează și protejează, asigurând reducerea forțelor de forfecare și frecare. Benzile pentru degete au o lungime de aproximativ 24" (61 cm) și pot fi tăiate la dimensiunea preferată.

ÎNGRIJIRE ȘI UTILIZARE A se spăla manual. A se usca la aer. Purtare: 20 de ore.

AVERTISMENTE Dacă aveți diabet zaharat sau circulație slabă, consultați medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacă apare durere, amorțeală, decolorare sau iritații, întrerupeți imediat utilizarea. Dacă simptomele persistă, consultați un medic specialist. Nu aplicați produsul pe răni deschise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Nu conține latex și „nu este fabricat cu latex din cauciuc natural” pericol de sufocare cu partea mică. Orice incident grav care a avut loc în legătură cu

(SK) Slovenčina

DigiStrip je súvislý pás upokojujúceho a zvlhčovacieho gélu, ktorý na jednej strane odpružuje a chráni a zároveň poskytuje úľavu od strihových a abrazívnych síl. Pásky Digistríp majú dĺžku približne 24" a môžu byť skrátené na požadovanú veľkosť.

STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE Ručné umývanie. Vysušte na vzduchu. Používajte po dobu 20 hodín.

VAROVANIA Ak máte cukrovku alebo slabý krvný obeh, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom. Ak pociťujete bolesti, znecitlivenie, zmenu farby alebo podráždenie, výrobok okamžite prestaňte používať. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Neumiestňujte výrobok na otvorené rany. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Výrobok je bez osahu latexu a „nie je vyrobený z prírodného kaučuku“ nebezpečenstvo zadusenía malou časťou. Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomôckou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je užívateľ alebo pacient usadený.

(SL) Slovensky

Trak za nožne prste je neprekinjen trak, ki ima na eni strani blažilni in vlažilni gel, na drugi pa blazinico, ki zagotavlja zaščito pred strižnimi in abrazivnimi silami. Traki za nožne prste so dolgi približno 24" (približno šestdeset centimetrov) in jih je mogoče odrezati na želeno velikost.

NEGA IN UPORABA Ročno pranje. Sušenje na zraku. 20-urna uporaba.

OPOZORILA Če imate sladkorno bolezen ali slabšo prekrvavitev, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Če se pojavi bolečina, otrplost, sprememba barve kože ali draženje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Izdelka ne polagajte na odprte rane. Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Ne vsebuje lateksa in "Ni narejeno iz lateksa iz naravnega kavčuka". nevarnost zadušitve z majhnimi delčki. Vsak resnejši incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri je uporabnik in / ali pacient.

(ES) Español

DigiStrip es una tira continua de gel calmante e hidratante en un lado que amortigua y protege al tiempo que alivia de las fuerzas abrasivas y cortantes. Las DigiStrips miden aproximadamente 24" de largo y pueden cortarse a la medida preferida.

CUIDADO Y USO Lavar a mano. Secar al aire. 20 horas de uso.

ADVERTENCIAS Si tiene diabetes o mala circulación sanguínea, consulte con su médico antes de usar este producto. Si experimenta dolor, entumecimiento, decoloración o irritación, deje de usarlo inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con un profesional médico. No colocar el producto sobre heridas abiertas. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Sin látex y no fabricado con látex de caucho natural. peligro de asfixia con piezas pequeñas. Se debe informar de todos los incidentes graves ocurridos en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

(SV) Svenska

DigiStrip är en kontinuerlig remsa av lugnande och återfuktande gel på ensidokuddar som skyddar och samtidigt lindrar från skjuv- och nötningskrafter. DigiStrip remsorna är ungefär 24 tum långa och kan skäras till önskad storlek.

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING Handtvätta. Lufttorka. 20 timmars användning.


VARNINGAR Om du har diabetes eller dålig cirkulation, rådgör med din läkare innan du använder produkten. Avbryt användningen omedelbart om det uppstår smärta, domningar, missfärgning eller irritationer. Kontakta en läkare om symtomen kvarstår. Applicera inte produkten över öppna sår. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Latexfri & "Inte gjord med naturgummilätex" smådelars kvävningsrisk. Alla allvariga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

SILIPOS® MEDICAL



DIGISTRIP

DIRECTIONS FOR USE & CARE

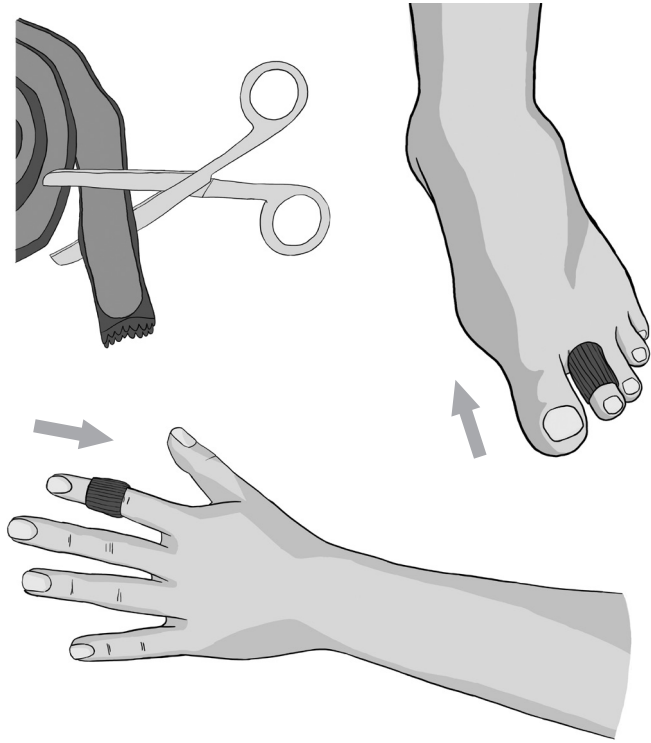

WARNINGS



* Not made with natural rubber latex

(BG) Български

Лентата за пръсти е непрекъсната лента с успокояващ и овлажняващ гел, омекотява и предпазва и същевременно осигурява облекчение от страничните сили и протриването. Лентата за пръсти е с дължина около 24 "и могат да се режат според индивидуалните нужди.

Грижи и употреба Да се пере на ръка. Да се суши на въздух. Да се носи максимум 20 часа на ден.

Предупреждения Ако имате диабет или лоша циркулация на кръвта, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт. Ако се появи болка, изтръпване, обезцветяване или дразнене, незабавно прекратете използването на продукта. Ако симптомите продължават, консултирайте се с медицинско лице. Не поставяйте продукта върху отворени рани. Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Без латекс и „не съдържа латекс от естествен каучук“ опасност от задавяне с малка частица. Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

(HR) Hrvatski

DigiStrip je kontinuirana traka s umirujućim i hidratantnim gelom na jednostranim jastučićima koja štiti i pruža olakšanje od sila smicanja i abrazivnih sila. Digistrip trake dugačke su približno 24" i mogu se rezati na željenu veličinu.

NJEGA I UPOTREBA Ručno pranje. Sušenje na zraku. 20 sati nošenja.

UPOZORENJA Ako imate dijabetes ili imate lošu cirkulaciju, prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se s liječnikom. Ako se pojave bol, utrnulost, promjena boje ili iritacije, odmah prekinite upotrebu. Ako simptomi potraju, obratite se liječniku. Ne stavljajte proizvod na otvorene rane. Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne sadrži lateks i „Nije napravljeno od lateksa od prirodne gume“ sitni dio, opasnost od gušenja. Sve ozbiljne incidente u vezi s uređajem trebate prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju sjedište, odnosno prebivalište.

(CZ) Čeština

DigiStrip je souvislý pruh, který je z jedné strany potažený zkliďňující a hydratačním gelem a který vystýlá a chrání prst před smykovými silami a odřeninami. Pruhy Digistrip mají délku přibližně 60 cm a lze je zastřihnout na požadovanou velikost.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE Omývejte ručně, Nechávejte oschnout na vzduchu, Lze nosit až 20 hodin.

UPOZORNĚNÍ Pokud máte cukrovku nebo špatný krevní oběh, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. V případě bolesti, necitlivosti, změny zabarvení kůže nebo podráždění si výrobek ihned sejměte. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Výrobek neobsahuje latex ani latex z přírodního kaučuku. nebezpečí udušení malými součástmi. Každý vážný incident, ke kterému v souvislosti se zařízením dojde, je nutno nahlásit výrobcí a příslušnému úřadu pro členský stát, v kterém má uživatel nebo pacient své sídlo.

(DK) Dansk

DigiStrip er en kontinuerlig strimmel med beroligende og fugtgivende gel på den ene side, der beskytter samtidig med, at den afbøder forskydning og slidende kræfter. Digi strips er ca. 61 cm lange og kan skæres til den foretrukne størrelse.

PLEJE & BRUG Håndvask. Lufttørres. 20 timers brug.

ADVARSLER Hvis du har diabetes eller dårligt blodomløb, skal du kontakte din læge, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår smerter, følelsesløshed, misfarvning eller irritationer, skal du straks afbryde brugen. Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer. Undgå at anbringe produktet over åbne sår. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Latexfri & "Ikke fremstillet med naturgummilatteks" fare for kvælning, mindre dele. Enhver alvorlig hændelse, der er forekommet i forbindelse med brug af udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten bor.

(NL) Nederlands

DigiStrip is een doorlopende strook met verzachtende en vochtinbrengende gel aan één kant die als een kussentje beschermt en tegelijkertijd verlichting biedt tegen wrijven en schuren. Digi strips hebben een lengte van ongeveer 24" (60,96 cm) en kunnen op de gewenste maat worden afgeknipt.

VERZORGING EN GEBRUIK Met de hand wassen. Aan de lucht drogen. 20 uur lang dragen.

WAARSCHUWINGEN Als u diabetes of een slechte bloedsomloop heeft, kunt u uw arts raadplegen alvorens dit product te gebruiken. Indien pijn, gevoelloosheid, verkleuring of irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met een arts. Plaats het product niet op open wonden. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Latexvrij en "Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex" Klein deel verstikkingsgevaar. Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

(EN) English

DigiStrip is a continuous strip of soothing and moisturizing gel on one side cushions and protects while providing relief from shear and abrasive forces. Digistrips are approximately 24" long and can be cut to preferred size.

DIRECTIONS FOR USE & CARE Hand wash, Air dry, 20 hours of wear.

WARNINGS If you have diabetes or poor circulation, consult your physician before using this product. If pain, numbness, discoloration, or irritation occurs, discontinue use immediately. If symptoms persist, consult a medical professional. Do not place product over open wounds. Keep out of reach of children and pets. Latex free & "Not made with natural rubber latex" Small part choking hazard. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

(ET) Eesti

Digiriba on ühtlane riba, mille ühel pool olev rahustav ja niisutav geel toetab ja kaitseb, leevendades samaaegselt nihke- ja kulumisjõude. Digiribad on umbes 60 cm pikad ja neid saab lõigata soovitud suurusesse.

HOOLDUS JA KASUTAMINE Käsitšipesu. Ohkkuivatus. Kandmisaeg 20 tundi.

HOIATUSED Kui teil on diabeet või kehv vereringe, siis konsulteerge enne toote kasutamist oma arstiga. Kui ilmneb valu, tuimus, värvimuutus või ärritus, siis lõpetage kohe kasutamise. Kui sümptomid ei kao, siis pöörduge meedikku poole. Ärge asetage toodet lahtistele haavadele. Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Lateksivaba ja ei sisalda looduslikku kummilateksit. Lõõbumisohu – väikesed osad. Kõikidest selle vahendiga seotud tõsisest juhtumitest tuleks teatada tootjale ja pädeval asutusele, mille liikmesriigis kasutaja ja/või patsient elab.

(FI) Suomi

DigiStrip on sidenauha, jonka yhdellä puolella on rauhoittavaa ja kosteuttavaa geeliä, joka pehmustaa ja suojaa samalla helpottaen leikkaus- ja hankausvammoja. Sidenauhut ovat noin 24 tuumaa pitkiä ja ne voidaan leikata haluttuun kokoon.

HOITO JA KÄYTTÖ Käsinpesu, Ilmakuivaus, Käyttöaika: 20 tuntia.

VAROITUKSET Jos sinulla on diabetes tai huono verenkierto, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos sinulle ilmenee kipua, tunnottomuutta, värimuutoksia tai ärsytyksiä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Älä aseta tuotetta avoimien haavojen päälle. Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa Lateksiton. Ei valmistettu luonnonkummilateksista, pieniä osia, tukehtumisvaara. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion pätevälle viranomaiselle, johon käyttäjä/potilas on sijoittautunut.

(FR) Français

DigiStrip est une bande continue de gel apaisant et hydratant sur un côté coussins et protège tout en procurant un soulagement contre les forces de cisaillement et d'abrasion. Les Digistrips mesurent environ 24 " de long et peuvent être coupés à la longueur souhaitée.

ENTRETIEN ET UTILISATION Lavage à la main, Sécher à l'air libre, 20h de durée d'utilisation.

AVERTISSEMENTS Si vous souffrez de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas de douleur, d'engourdissement, de décoloration ou d'irritation, cessez immédiatement son utilisation. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un professionnel de santé. Ne placez pas le produit sur des plaies ouvertes. Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Sans latex et « N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel » Risque d'étranglement partiel. Il est impératif de signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

(DE) Deutsch

DigiStrip ist ein durchgehender Streifen mit beruhigendem und feuchtigkeitsspendendem Gel auf einer Seite, der polstert und schützt und gleichzeitig Scher- und Abriebkräfte lindert. Digistrips sind ungefähr 60cm lang und können auf die gewünschte Größe geschnitten werden.

PFLEGE & GEBRAUCH Von Hand waschen, An der Luft trocknen, 20 Stunden Tragedauer,

HINWEISE Wenn Sie an Diabetes oder Kreislaufstörungen leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Schmerzen, Taubheitsgefühl, Verfärbungen oder Reizungen auftreten, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Wenn die Symptome weiterhin bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt. Produkt nicht über offenen Wunden anbringen. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Latexfrei, nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

(GR) Ελληνικά

Η **Ταινία Digistrip** είναι μια συνεχής ταινία καταπραυντικής και ενυδατικής γέλης στη μία πλευρά των μαξιλαιών και προστατεύει ενώ παρέχει ανακούφιση από τραυματισμούς. Οι ταινίες Digistrip έχουν μήκος περίπου 24" και μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Πλύσιμο στο χέρι, Στέγνωμα στον αέρα, 20 ώρες χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αν έχετε διαβήτη ή κακή κυκλοφορία του αίματος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αν παρατηρηθεί πόνος, μούδιασμα, αποχρωματισμός του δέρματος ή ερεθισμός, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. Μην εφαρμόσετε το προϊόν επάνω σε ανοιχτές πληγές. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Χωρίς Λάτεξ και «Δεν είναι φτιαγμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ» κίνδυνος πνιγμού από μικρό αντικείμενο. Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

(HU) Magyar

A **DigiStrip** egy hosszú csőkötszer az egyik oldalán nyugtató és hidratáló géllal, amely párnáz és véd, miközben csökkenti az ujra ható nyíró- és dörzsölő erőket. A DigiStrip 61 cm hosszú, méretre vágható kötszer.

ÁPOLÁS ÉS HASZNÁLAT Kézi mosás, Szárítás levegőn, 20 órán keresztül használható,

FIGYELMEZTETÉSEK Amennyiben cukorbeteg, vagy más okból vérkeringéssel kapcsolatos problémái vannak, a termék használatát előtt konzultáljon orvosával. Ha fájdalom, zsibbadás, elszíneződés vagy irritáció jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Ne helyezze a terméket nyílt sebek fölé Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Latex mentes és „Nem természetes latexgumból készült” fulladásveszély a kicsi részek miatt. Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett bármilyen súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és / vagy a páciens letelepedett.

(GA) Gaeilge

Digistrip ná stráice leanúnach glóthaí mhaothaithe ar thaobh na bpíliní agus a chosnaíonn, ag tabhairt faoisimh freisin ó fhórsaí gearrtha agus creimtheacha. Tá Digistrips timpeall 24" ar fhad agus is féidir iad a ghearradh chuig an tomhais innhíaniaithe.

CÚRAM AGUS ÚSÁID Níochán Láimhe, Triomú Aeir, 20h uisce.

RABHAIDH Má tá diaibéiteas nó droch-imshruthú ort, Labhair le do dhochtúir sula n-úsáideann tú an tairge seo. Má tharlaíonn pian, maóile, dídhathú, nó greannú, scoir den úsáid láithreach. Má leanann siomptóim, labhair le gairmí lachta. Ná cuir an tairge ar chneácha oscaitle. Coinnigh amach ó aimsiú leanua agus peataí. Saor ó Laitéis agus "níl sé déanta le láiteis rubair nádúrtha" guais thachta ó chomhpháirteanna beaga. Ba cheart aon eachtra thromchúiseach a bhaineann leis an bhfeiste seo a thuairisciú don mhonaróir agus don údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar lonnaithe.

(IT) Italiano

Digistrip è una striscia con gel lenitivo e idratante su un lato che ammortizza e protegge fornendo sollievo da tagli e abrasioni. Digistrip è lunga circa 60 cm e può essere tagliata nella dimensione preferita.

CURA E UTILIZZO Lavare a mano, Asciugare all'aria, 20 ore di utilizzo.

AVVERTENZE In caso di diabete o problemi di circolazione, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Se si verificano dolore, intorpidimento, scolorimento o irritazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Non posizionare il prodotto su ferite aperte. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Senza lattice. Non contiene lattice di gomma naturale, piccole parti rischio di soffocamento. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente.

(LV) Latviešu

Pirksta trubiņa **DigiStrip** ir gara lente, kurai viena puse ir ar nomierinošu un mitrinošu gēlu, kas pasargā pirkstus no nobrāzumiem. Digistrips trubiņas ir apmēram 24" garas, un tās var sagriezt vēlāmājā izmērā.

KOPŠANA UN LIETOŠANA Mazgāt ar rokām, Žāvēt gaisā, Valkāt 20 stunda,

BRĪDINĀJUMI Ja Jums ir cukura diabēts vai asinsrites problēmas, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja rodas sāpes, nejutīgums, ādas krāsas maiņa vai kairinājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Neuzklājiēt produktu uz atvērtām brūcēm. Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nesatur lateksu. "Nav izgatavots no dabīgā kaučuka lateksa" Aizrīšanas risks – nelīdīgas detaļas. Par jebkuru nopietnu incidentu, kas radies sakarā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam vai kompetentai iestādei tai dalībvalstī, kur atrodas lietotājs un/vai pacients.