

SILIPOS
®
Engineered in Custom and Precision

Silipos Holding LLC
7049 Williams Road
Nisgata Falls, NY 12434
1-800-229-4404
Made with Impaired Material from Taiwan &
Further Manufactured in the United States
www.silipos.com

WMDE b.v.
Bergweg 18
6085 AT Hon
Holland
[CE] [E-CRIP]

© Silipos Holding, LLC

g806
Rev. 8

Silopad artrīta/diabēta gēla zēķe ir viena slāņa zēķes, kuras zole ir pārklāta ar 1/16" gēla slāni. Gēla zole nodrošina papildu atbalstu, amortizāciju, aizsardzību un komfortu, vienlaikus samazinot berzēšanos, slīdēšanu un tūlnu veidošanos.

KOPŠANA UN LIETOŠANA Mazgāt ar rokām. Žāvēt gaisā. Valkāt 20 stunda. Nebalināt.

BRĪDINĀJUMI Ja Jums ir cukura diabēts vai asinsrites problēmas, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja rodas sāpes, nejutīgums, ādas krāsas maiņa vai kairinājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Neuzklājiet produktu uz atvērām brūcēm. Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nesatur lateksu. "Nav izgatavots no dabīgā kaučuka lateksa" Par jebkuru nopietnu incidentu, kas radies sakarā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam vai kompetentai iestādei tai dalībvalstī, kur atrodas lietotājs un/vai pacients.

Silopad Artritinē/Diabetinē Gelinē Kojinē yra vieno sluoksnio kojine sukurtas su 1/16 colių gelio padu. Gelinis vidpadis suteikia papildomą atramą, minkštumą, apsaugą ir komfortą, tuo pačiu sumažinant trintį, odos pažeidimus ir nuospaudų susidarymą.

PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS Plauti rankomis. Džiovinkite natūraliai. 20 valandų nešiojimas. Nebalinkite.

ISPĖJIMAI Jeigu sergate cukriniu diabetu arba sutrikusia kraujotaka, pasikonsultuokite su gydytoju prieš šio produkto naudojimą. Nedešiant nustokite naudoti šį produktą jeigu jaučiate skausmą, nutirpimą, pastebėjote spalvos pasikeitimą arba odos dirginimą. Jei šie simptomai tęsiasi, pasikonsultuokite su medicinos specialistu. Nenuaukokite ant atvirų žaizdų. Laikykite vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Be lateksu ir "pagaminti be natūralios lateksu gumos". Apie bet koki su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock hiya kalzetta b'saff wiehed iddisinjata b'1/16" ta' gel mal-qiegh kollu. Il-suletta tal-gel tipprovdi appogg' miżjud, protezzjoni u kumditā waqt li tnaqqas il-frizzjoni, il-forzi tal-għafis, u l-formazzjoni ta' kallijiet.

KURA U UŽU Ahsel bl-idejn. Hallih jinxef b'mod naturali. 20 siegha ta' užu. Tibbljicax.

TWISSIJET Jekk għandek id-djabet jew ċirkolazzjoni hażna, ikkonsulta lit-tabib tiegħek qabel tuża dan il-prodott. Jekk ikollok Uđigh, tnemnim, tibdil fil-kulur, jew irritazzjonijiet, waqqaf l-żu immedjatament. Jekk is-sintomi jipperstaju, ikkonsulta professjonist mediku. Tpođđix il-prodott fuq feriti miġfuta. Żomm fejn ma jintlahaqx mit-ftal u mill-annimali domestiċi. Hielees mill-Latex & "Mhux magħmul minn latex tal-lastiku naturali" Kwalunkwe incident serju li sehh f'konnessioni mal-apparat għandu jiđi rrapportat lill-manifattur u lill-awtoritā kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-utent u/jew il-pazjent.

Skarpeta želowa na zapalenie stawów/cukrzyce Silopad jest jednowarstwową skarpetą z żelu o grubości ok. 2 mm na całej podszewie. Żelowa wkładka zapewnia dodatkowe wsparcie, amortyzację, ochronę i komfort, jednocześnie redukując tarcie, sily ścinające i tworzenie się odcisków.

PIELĘGNACJA I STOSOWANIE Prac ręcznie. Suszyć na powietrzu. 20 godzin użytkowania. Nie wybielać.

OSTRZEŻENIA W przypadku cukrzycy lub słabego krążenia, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się lekarzem. W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, przebarwień lub podrażnień, należy natychmiast przerwać stosowanie. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Nie umieszczać produktu na otwartych ranach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Bez lateksu oraz "Wyprodukowano bez użycia naturalnego lateksu" Każdy poważny incydent, którego wystąpienie ma związek z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

A **Meia de gel artrítica/diabética Silopad** é uma meia de uma só camada concebida com 1/16" (2 mm) de gel em toda a sola. A palmilha de gel proporciona apoio adicional, amortecimento, proteção e conforto enquanto reduz a fricção, forças de deslizamento e formação de calos.

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO Lavagem das mãos. Secagem ao ar livre. 20h de utilização. Não usar lixívia.

AVISOS Se tiver diabetes ou má circulação, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Se ocorrer dor, dormência, descoloração ou irritações, interromper imediatamente a utilização. Se os sintomas persistirem, consultar um profissional médico. Não colocar o produto sobre feridas abertas. Manter fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Sem látex e "Não fabricado com látex de borracha natural" Qualquer incidente grave que decorra da utilização do dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock (Şoşetā cu gel Silopad pentru persoane cu artrozā/diabet) este o ŗoşetā cu un singur strat, realizatā cu gel cu grosimea de 1/16" (2 mm) pe întreaga talpā. Talpa cu gel oferā un plus de susţinere, amortizare, protecţie şi confort, reducānd în acelaşi timp frearea, forţele de forfecare şi formarea calusului.

INGRIJIRE ŞI UTILIZARE A se spāla manual. A se usca la aer. Purtare: 20 de ore. A nu se utiliza înāibitori.

AVERTISMENTE Dacā aveţi diabet zaharat sau circulaţie slabā, consultaţi medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacā apare durere, amortealā, decolorare sau iritaţii, interrompeţi imediat utilizarea. Dacā simptomele persistā, consultaţi un medic specialist. Nu aplicaţi produsul pe rāni deschise. A nu se lāsa la îndemāna copiilor şi a animalelor de companie. Nu conţine latex şi „nu este fabricat cu latex din cauciuc natural" Orice incident grav care a avut loc în legăturā cu dispozitivul trebuie raportat producătorului şi autoritāţii competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul şi/sau pacientul.

Artritikā / diabetickā gēlovā ponoška Silopad je jednovrstvovā ponoška navrhnutā s gēlom hrubky 1/16" v celej stielke. Gēlovā stielka poskytuje ďalšiu podporu, tlmenie, ochranu a pohodlie pri súčasnom znížení trenia, strihových sil a tvorby zatvrdnutej kože.

STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE Ručné umývanie. Vysušte na vzduchu. Používajte po dobu 20 hodín. Nepoužívajte bieliadlo.

VAROVANIA Ak máte cukrovku alebo slabý krvný obeh, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pocítate bolesť, znecitlivenie, zmenu farby alebo podráždenie, výrobok okamžite prestaťte používať. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Neumiestňujte výrobok na otvorené rany. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Výrobok je bez osahu latexu a „nie je vyrobený z prírodného kaučuku" Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomocňou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgānu členského štátu, v ktorom je užívateľ alebo pacient usadený.

Gelna nogavica za artritis / diabetes Silopad je enoslojna nogavica z 1/16" (dva milimetra) plastjo gela po celotnom podplatlu. Gelní vloček zagotavlja dodatno podporo, blaženje, zaščito in udobje, hkrati pa zmanjšuje trenje, strižne sile in nastanek otiščancev.

NEGA IN UPORABA Ročno pranje. Sušenje na zraku. 20-urna uporaba. Ne uporabljajte belila.

POZORILA Če imate sladkorno bolezen ali slabšo prekrvavitve, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Če se pojavi bolečina, otrplost, sprememba barve kože ali draženje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Izdelka ne polagajte na odprte rane. Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubimčkov. Ne vsebuje lateksa in "Ni narejeno iz lateksa iz naravnega kavčuka". Vsak resnejši incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu državne članice, v kateri je uporabnik in / ali pacient.

El calcetín de gel para artríticos/diabéticos Silopad es un calcetín de una capa con 1/16" de gel en la suela. La suela de gel proporciona mayor soporte, amortiguación, protección y comodidad al tiempo que reduce la fricción, las fuerzas cortantes y la formación de callosidades.

CUIDADO Y USO Lavar a mano. Secar al aire. 20 horas de uso. No usar blanqueador.

ADVERTENCIAS Si tiene diabetes o mala circulación sanguínea, consulte con su médico antes de usar este producto. Si experimenta dolor, entumecimiento, decoloración o irritación, deje de usarlo inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con un profesional médico. No colocar el producto sobre heridas abiertas. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Sin látex y no fabricado con látex de caucho natural. Se debe informar de todos los incidentes graves ocurridos en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

Silopads artritisksa/diabetiska gelstrumpan är en enkelskiktstrumpa designad med 1/16-tums gel genom hela sulan. Gelinersulan ger extra stöd, dämpning, skydd och komfort samtidigt som friktion, skjuvkrafter och förhådnadsbildning minskas.

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING Handtvätta. Lufttorka. 20 timmars användning. Använd inte blekmedel.


VARNINGAR Om du har diabetes eller dålig cirkulation, rådgör med din läkare innan du använder produkten. Avbryt användningen omedelbart om det uppstår smärta, domningar, missfärgning eller irritationer. Kontakta en läkare om symptomen kvarstår. Applicera inte produkten över öppna sår. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Latexfri & "Inte gjord med naturgummlatex" Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock er en sokk med enkeltlag utformet med 1/16" gel i sålen. Gelinersålen gir ekstra støtte, demping, beskyttelse og komfort samtidig som friksjon, skjærkrefter og kallusdannelse reduseres. En smollos tådesing eliminerer slitasje og trykk på tærne, mens den ikke-restriktive mansjetten gir optimal sirkulasjon. Sokken mot artritt/diabetes kan brukes med eller uten diabetessko. Dette produktet kan vaskes og brukes pånytt. • Bidrar til å redusere friksjon, slitasje, revmatoid og kallusdannelse. • Fungerer som et bløtvevssupplement til fettputeatropi. • anbefalt for diabetisk, revmatoid og ufølsom fot.


BRUK OG PLEIE Håndvask. Lufttork. 20 timers bruk. Skal ikke blekes.

ADVARSEL Hvis du har diabetes eller dårlig sirkulasjon, kontakt legen din før du bruker dette produktet. Hvis smerte, nummenhet, misfarging eller iritasjon oppstår, avslutt bruk umiddelbart. Hvis symptomer vedvarer, kontakt en medisinsk fagperson. Produktet skal ikke plasseres over åpne sår. Skal holdes utenfor barns og kjæledyrs rekkevidde. Latexfri og "Ikke laget med naturgummlateks" Enhver alvorlig hendelse som har oppstått relatert til enheten bør rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i medlemsstaten brukeren og/eller pasienten er etablert.

SILOPAD
ARTHRITIC/DIABETIC
GEL SOCK

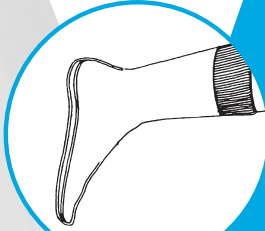

SILIPOS
MEDICAL

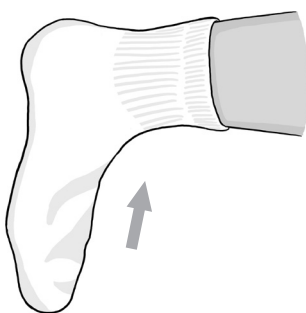

* Not made with natural rubber latex

Чорапът с гел при артрит/диабете е еднослойен чорап, проектиран с гел с дебелина 1/16" по цялата стелка. Стелката с гел осигурява допълнителна опора, омекотяване, защита и удобство, като същевременно намалява триенето, протриването и образуването на мозоли.

ГРИЖИ И УПОТРЕБА Да се пере на ръка. Да се суши на възду. Да се носи максимум 20 часа на ден. Да не се третира с белина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Ако имате диабет или лоша циркулация на кръвта, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт. Ако се появи болка, изтръпване, обезцветяване или дразнене, незабавно прекратете използването на продукта. Ако симптомите продължават, консултирайте се с медицинско лице. Не поставяйте продукта върху отворени рани. Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Без латекс и „не съдържа латекс от естествен каучук“ Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

Silopad artritichna/diabeticka gel čarapa je jednoslojna čarapa dizajnirana sa slojem gela debljine 1/16" u ulošku. Uložak s gelom pruža dodatnu potporu, ublažavanje, zaštitu i udobnost, istodobno smanjujući trenje, sile smicanja i stvaranje žuljeva.

NIJEGA I UPOTREBA Ručno pranje. Sušenje na zraku. 20 sati nošenja. Ne izbjeljivati.

UPOZORENJA Ako imate dijabetes ili imate lošu cirkulaciju, prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se s liječnikom. Ako se pojave bol, utrnulost, promjena boje ili iritacije, odmah prekinite upotrebu. Ako simptomi potraju, obratite se liječniku. Ne stavljajte proizvod na otvorene rane. Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne sadrži latices i „Nije napravljen od laticesa od prirodne gume“ Sve ozbiljne incidente u vezi s uređajem trebate prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju sjedište, odnosno prebivalište.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock je jednovrstva ponožka, jejíž podrážka je potažená 2 mm silnou vrstvou gelu. Gelová podrážka poskytuje dodatečnou podporu, tlumení, ochranu a pohodlí a zároveň redukuje tření, smykové síly a tvorbu mozolů.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE Omyvejte ručně. Nechávejte oschnout na vzduchu. Lze nosit až 20 hodin. Neošetřujte výrobek bělidly.

UPOZORNĚNÍ Pokud máte cukrovku nebo špatný krevní oběh, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. V případě bolesti, necitlivosti, změny zabarvení kůže nebo podráždění si výrobek ihned sejměte. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích любимců. Bez latices i „ne obsahuje latices ani latex z přírodního kačuků. Každý vážný incident, ke kterému v souvislosti se zařízením dojde, je nutno nahlásit výrobci a příslušnému úřadu pro členský stát, v kterém má uživatel nebo pacient své sídlo.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock er en enkeltlagssok designet med 1/16" gel i hele sålen. Gelsålen giver ekstra støtte, afbødnig, beskyttelse og komfort, samtidig med at friktion, forskydninger og dannelse af callus reduceres.

PLEJE & BRUG Håndvask. Lufttørres. 20 timers brug. Må ikke bleges.

ADVARSLER Hvis du har diabetes eller dårligt blodløb, skal du kontakte din læge, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår smerter, følelseløshed, misfarvning eller irritationer, skal du straks afbryde brugen. Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer. Undgå at anbringe produktet over åbne sår. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Latexfri & "Ikke fremstillet med naturgummlatex" Enhver alvorlig hændelse, der er forekommet i forbindelse med brug af udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten bor.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock is een sok met één laag, ontworpen met 1/16" (2 mm) gel over de hele zool. De gel binnenzool biedt extra steun, biedt als een sok een bescherming en comfort en vermindert wrijving, schuurskrachten en eeltvorming.

VERZORGING EN GEBRUIK Met de hand wassen. Aan de lucht drogen. 20 uur lang dragen. Niet bleken.

WAARSCHUWINGEN Als u diabetes of een slechte bloedsomloop heeft, kunt u uw arts raadplegen alvorens dit product te gebruiken. Indien pijn, gevoelloosheid, verkleuring of irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met een arts. Plaats het product niet op open wonden. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Latexvrij en "Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex" Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock is a single layer sock designed with 1/16" gel throughout the sole. The gel insole provides added support, cushioning, protection, and comfort while reducing friction, shear forces, and callus formation. A seamless toe design eliminates abrasion and pressure on the toes, while the non-restrictive cuff allows for optimum circulation. The Arthritic/Diabetic sock can be worn with or without diabetic shoes. This product is washable and reusable. • Helps reduce friction, abrasion, shear forces, and callus formation. • Serves as a soft tissue supplement to fat pad atrophy. • Recommended for diabetic, rheumatoid, and the insensate foot.

DIRECTIONS & USE Hand Wash. Air Dry. 20 Hours of Wear. Do Not Bleach.

WARNINGS If you have diabetes or poor circulation, consult your physician before using this product. If pain, numbness, discoloration, or irritation occurs, discontinue use immediately. If symptoms persist, consult a medical professional. Do not place product over open wounds. Keep out of reach of children and pets. Latex free & "Not made with natural rubber latex" Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Silopadi artritiline/diabeetiline geelsock on ühekihiline sokk, mis on disainitud 2 mm-se geeliga kogu tallas. Geelist sisaldab lisab toet, pehmendust, kaitset ja mugavust ning vähendab samaaegselt hõõrdumist, nihkejõude ja sarvkesta moodustumist.

HOOLDUS JA KASUTAMINE Käsitsepesu. Õhkuivatus. Kandmisae 20 tundi. Mitte valgendada.

HOIATUS Kui teil on diabeet või kehv vereeringe, siis konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga. Kui ilmneb valu, tuiumus, värvimuutus või ärritus, siis lõpetage koheselt kasutamine. Kui sümptomid ei kao, siis pöörduge meedikku poole. Ärge asetage toodet lahtistele haavadele. Hoolda lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Latexisvaba ja ei sisalda looduslikku kummilaiteski. Kõikidest selle vahendiga seotud tõsisest juhtumitest tuleks teatada tootjale ja pädevale asutusele, mille liikmesriigis kasutaja ja/või patsient elab.

Silopad niveltulehdus- / diabeetiline geelisukka on üksikerroskainen sukka, jonka pohjassa on 1/16 tuumaa geeliä. Geelipohjallinen tarjoaa lisätukea, pehmennystä, suojaa ja mukavuutta vähentäen samalla kitkaa, leikkauksia ja kaluksien muodostumista.

HOITO JA KÄYTTÖ Käsinpesu. Ilmakuivatus. Käyttöaika: 20 tuntia. Ei saa valkaista.

VAROITUKSET Jos sinulla on diabetes tai huono verenkierto, ota yhteys lääkärisi ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos sinulle ilmenee kipua, tunnottomuutta, värimuutoksia tai ärsykyksiä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Älä aseta tuotetta avoimien haavojen päälle. Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Latexiton. Ei valmistettu luonnollisista kummilaitesista. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion pätevälle viranomaiselle, johon käyttäjä/potilas on sijoittautunut.

Silopad Arthritic/Diabetic Gel Sock est une chaussette monocouche conçue avec un gel de 1/16" sur toute la semelle. La semelle intérieure en gel offre un soutien, un effet de coussin, une protection et un confort supplémentaires tout en réduisant la friction, les forces de cisaillement et la formation de callosités.

ENTRETIEN ET UTILISATION Lavage à la main. Sécher à l'air libre. 20h de durée d'utilisation. Ne pas javelliser.

AVERTISSEMENTS Si vous souffrez de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas de douleur, d'engourdissement, de décoloration ou d'irritation, cessez immédiatement son utilisation. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un professionnel de santé. Ne placez pas le produit sur des plaies ouvertes. Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Sans latex et « N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel » Il est impératif de signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

Die Arthritische Silopad-Diabetes-Gel-Socke ist eine einlagige Socke mit 1.5mm Gel auf der Sohle. Die Gel-Innensohle bietet zusätzliche Halt, Dämpfung, Schutz und Komfort und reduziert gleichzeitig Reibung, Scherkräfte und Hornhautbildung.

PFLEGE & GEBRAUCH Von Hand waschen. An der Luft trocknen. 20 Stunden Tragedauer. Nicht bleichen.

HINWEISE Wenn Sie an Diabetes oder Kreislaufstörungen leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Schmerzen, Taubheitsgefühl, Verfärbungen oder Reizungen auftreten, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Wenn die Symptome weiterhin bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt. Produkt nicht über offenen Wunden anbringen. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Latexfrei, nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

Η Αρθριτική/Διαβητική Κάλτσα Γέλης Silopad είναι μια κάλτσα μονής στρώσης σχεδιασμένη με 1/16" γέλης σε όλη τη σόλα. Η εσωτερική σόλα γέλης προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη, απορρόφηση των κραδασμών, προστασία και άνεση ενώ μειώνει την τριβή, τις διατμητικές δυνάμεις και το σχηματισμό κάλυψης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Πλύνετε στο χέρι. Στεγνώστε στον αέρα. 20 ώρες χρήσης. Μη χρωματιστείτε χλωρίνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αν έχετε διαβήτη ή κακή κυκλοφορία του αίματος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αν παρατηρήσει πόνος, μούδιασμα, αποχρωματισμός του δέρματος ή ερεθισμός, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. Μην εφαρμόσετε το προϊόν πάνω σε ανοιχτές πληγές. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Χωρίς λάτεξ και «Δεν είναι φτιαγμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ» Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης/ο πάσιεντς.

A **Silopad Arthritic / Diabetic Gel Sock** egy egyrétegű zokni, 1/16"(1,59 mm)-es géltalpbetéttel. A géltalpbetét támaszt, párnázást, védelmet és kényelmet nyújt, miközben csökkenti a súrlódást, a nyíróerőket és a bőrkeményedések képződését.

ÁPOLÁS ÉS HASZNÁLAT Kézi mosás. Szárítás levegőn. 20 órán keresztül használható. Ne fehéritse.

FIGYELMEZTETÉSEK Amennyiben cukorbeteg, vagy más okból vérkeringéssel kapcsolatos problémái vannak, a termék használatát előtt konzultáljon orvosával. Ha fájdalom, zsibbadás, elszíneződés vagy irritáció jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Ne helyezze a terméket nyit sebek fölé. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Latex mentes és „Nem természetes latexgumiból készült” Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett bármilyen súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó is / vagy a páciens letelepedett.

Is stoc sraithé singil é **Stoc Glóthaigh Airthritís/Diaibéiteach Silopad** deartha le glóthach 1/16" ar fud an bhoinn. Tugann an bonn istigh glóthaigh a thuilleadh tacaíochta, cosanta agus compord, ag laghdú frithchuimite, fórsaí beartha agus foirmiú creagáin chomh maith.

CÚRAM AGUS ÚSÁID Níochán Láimhe. Triomá Aeir. 20h uisce. Ná tuar.

RABHAIDH Má tá diaibéatas nó droch-imshruthú ort, Labhair le do dhochtúir iula n-úsáideann tú an tairge seo. Má tharlaíonn pian, maíole, didháthú, nó greannú, scoir den úsáid láithreach. Má leanann siontóimín, labhair le gairní liachta. Ná cuir an tairge ar cheanaé na oscaíte. Coinnigh amach ó baineáin leanaú agus peatá. Saor ó Láitéis agus "níl sé aganta le láitéis údar náidúrtha" Ba cheart aon eacitra thromchúiseach a bhaineann leis an bhfeiste seo a thuairiscíú don mhonaróir agus le rúbáir inniúil an Bhalstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar Ionáithé.

La **Calza con gel Silopad per artrite/diabete** è una calza monostrato realizzata con uno strato di gel di quasi 2 mm su tutta la suola. La soletta in gel fornisce supporto, ammortizzazione, protezione e comfort extra riducendo l'attrito, le forze di taglio e la formazione di calli.

CURA E UTILIZZO Lavare a mano. Asciugare all'aria. 20 ore di utilizzo. Non candeggiare.

AVVERTENZE In caso di diabete o problemi di circolazione, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Se si verificano dolore, intorpidimento, scolorimento o irritazione, interrompere immediatamente l'utilizzo. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Non posizionare il prodotto su ferite aperte. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Senza lattice. Non contiene lattice di gomma naturale. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente.