



NACHT



REIßVERSCHLUSS



2-1 FUNKTION



## GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® BLANKET SENSITIVE

Mit der Somna® Blanket kommen Sie zur Ruhe. Die Ketten in den längsverlaufenden Kanälen sorgen dafür, dass sich die Decke eng und mit angenehmem Druck um den Körper legt.



### GEBRAUCH

Die Kettenbettdecke basiert auf Somnas eigener patentierter Lösung mit eingenähten Ketten in längsverlaufenden Kanälen. Die Ketten sind an beiden Enden befestigt und können nicht herausgenommen werden. Die Metallketten sind lackiert und damit vollständig geräuschlos.

Die Kettenbettdecke weist eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine wattierte Seite.

Letztendlich entscheiden Sie selbst, welche Seite Sie bevorzugen. Mit der Kettenseite am Körper wird eine größere taktile Stimulation erreicht. Testen Sie einfach aus, welche Seite sich am besten anfühlt. Die Kettenseite hat ein Halbmond-Textil, um es von der gepolsterten Seite zu unterscheiden.

Beziehen Sie die Kettenbettdecke mit einem Bettdeckenbezug. Sie können die ganze Nacht über mit der Decke schlafen. Allerdings empfehlen wir, die Decke zur Eingewöhnung anfangs für kürzere Zeiträume zu verwenden. Anschließend können Sie die Anwendungsdauer Stück für Stück erhöhen. Dank ihrer Flexibilität können Sie die Decke auch umschlagen, wenn Sie an einer bestimmten Körperstelle ein höheres Gewicht wünschen. Die Decke soll möglichst kühlend wirken. Die Somna® Blanket Sensitive ist eine weichere und wärmere Version mit zusätzlicher Wattierung.

Wenn die Decke über die Schultern gelegt wird, formt sie sich während des Sitzens nach dem Körper und sorgt für Entspannung während der Tagesruhe.

## PFLEGEHINWEISE

Den im Lieferumfang enthaltenen Waschbeutel verwenden. Decken mit Reißverschluss vor dem Waschen teilen.



Schonwaschgang bei max.  
60 °C



Kein Bleichmittel verwenden



Nicht in den Wäschetrockner  
geben



Nicht bügeln



Bei der chemischen Reinigung keine kräftigeren Flüssigkeiten als Tetrachlorethylen verwenden.



## PRODUKTINFORMATIONEN



Die Kettenbettdecke erfüllt die Anforderungen des Standards Entzündbarkeit mit kleiner offener Flamme (SS-EN ISO 12952-2). Außenmaterial aus flamm sicherem Trevira CS-Material.

**Textil:** 100% Polyester Trevira CS, **Füllung:** Stahlketten & 100% Polyester




Die Somna® Blanket ist CE-zertifiziert nach der Medizinprodukttrichlinie 93/42/EWG.



Die Somna® Blanket ist ein schwedisches patentiertes Produkt.

## GRÖSSEN/GEWICHTSKLASSEN

140 x 200 cm      4, 6, 8, 10, 12, 14 kg  
100 x 140 cm      3, 5 kg

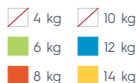

Die Farbmarkierung an der kurzen Kante des Bezuges gibt das Gewicht des Stoffes gemäß den obigen Farben an.

## GEGENANZEIGEN

- Bei schwacher Lungenkapazität sollte vor Anwendung einer Gewichtsdecke ein Arzt konsultiert werden.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob implantierte Geräte durch das Metall in den Ketten beeinträchtigt werden können.
- Achten Sie auf die Stolpergefahr, wenn die Gewichtsdecke auf dem Fußboden liegt.
- Seien Sie vorsichtig bei schwacher Muskelkapazität.
- Bei Verwendung der Hygieneabdeckung Erstickungsgefahr beachten.