

WCS[®]

WCS[®] Light

Chaussure pour le soin des plaies **MD**

LiMA: 26.01.04.02.1

**Nouveau
Design**



Pour le traitement
du **syndrome du
pied diabétique**
et des ulcérations



Deux modèles éprouvés qui séduisent !

Les avantages



NOUVEAU Semelle en EVA légère

Mesure
neutre

WCS®

WCS® / WCS®
Light Insoles

WCS® Light



Semelle Fully Rocker

Design semelle Fully Rocker

- Démarche sûre et physiologiquement correcte
- Sensation de port agréable
- Semelle extérieure en caoutchouc EVA résistante à l'abrasion, amortissante, antidérapante

Système de semelle à 4 couches (WCS® / WCS® Light Insoles)

- Ajustabilité individuelle
- Décharge ciblée de la pression plantaire
- Reorderable

Fermeture auto-agrippante

- Ligne de couture pour une découpe nette de la longueur
- Adaptation optimale

Contrefort agrandi

- Maintien sûr
- Stable

Confort

- Désinfectable
- Indéformable + durable

Les différences



Découpe du matériau extérieur

WCS®

- Matériau extérieur modifiables individuellement → Décharge de pression ciblée
- Modifiable au niveau médial et latéral → Plage de modification désormais plus grande au niveau de l'articulation du gros orteil
- Possibilité d'ouverture large → Accès facile + espace pour les bandages volumineux
- Doublure intérieure à alvéoles fermées → Sans coutures, ultra douce (Plastazote®)

WCS® Light

- Chaussure fermée → Protection contre l'humidité + la saleté
- Zone des orteils volumineuse + sans coutures → Espace pour les bandages volumineux
- Doublure intérieure à alvéoles fermées au niveau du talon et du métatarse → Sans coutures, ultra douce
- Disponible uniquement en paire

Matériau extérieur extensible + perméable à l'air



Maximum d'ajustement individuel.



Modification et disposition des semelles

La conception et la préparation manuelle ultérieure du système de semelles à quatre couches permettent une décharge ponctuelle de la pression au niveau plantaire. Les quatre couches en Plastazote®, EVA et mousse de semelle se différencient par leur dureté Shore et leur élasticité. Pour déterminer l'emplacement exact à décharger, marquer la zone concernée sur le pied. Pour ce faire, utilisez un crayon marqueur, entourez la plaie et reportez ensuite la zone sur la semelle. Le marquage sur la semelle peut être reporté sur les couches inférieures à l'aide d'une aiguille. Les semelles peuvent ensuite être travaillées aux endroits marqués à l'aide d'un scalpel. La position ou la disposition des quatre couches de la semelle peut également être adaptée au processus de guérison (voir tableau ci-dessous).

Système de semelle à
4 couches modifiable



Structure de la semelle

Différentes duretés Shore pour une répartition optimale de la pression. La semelle en Plastazote® beige est toujours placée sur le dessus, sans traitement, comme couche de protection hygiénique.

Photo	Couleur	Matériel	Densité	Épaisseur	Valeur duromètre ¹
1	Beige	Plastazote®	Faible	6,3 mm	26
2	Blanc	EVA	Moyenne	6,3 mm	42
3	Orange	EVA	Forte	6,3 mm	50
4	Bleu	Mousse de la semelle	Haute densité	3,1 mm	29

¹ Écart de 2° à 3° par rapport aux valeurs indiquées possible



Instruction vidéo
Modification
WCS® & Système
à 4 semelles


Modification et disposition des semelles

Stade sur l'échelle de Wagner

Prise en charge aiguë


Après cicatrisation

	Disposition des semelles	Modification	Modifier disposition des semelles
Pas d'ulcère plantaire ouvert			
0 à 1 sur l'échelle de Wagner			
2 à 3 sur l'échelle de Wagner			

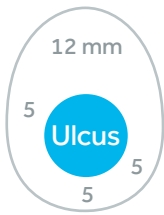


Exemple de rapport de grandeur
Ulcère / section de semelle
+ 12 mm distal


Exemple d'utilisation découpe de la semelle

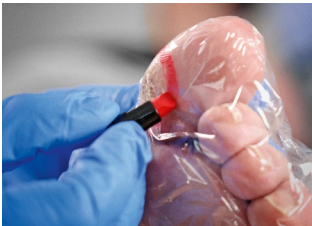

Repérage de la position
et taille de l'ulcère

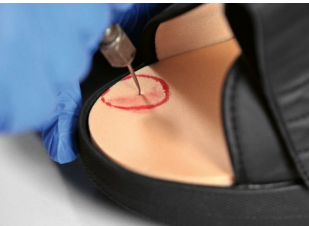

Transfert sur les semelles

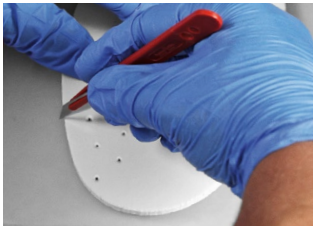

Traitement des semelles



Exemple de semelle modifiable

Chaussure pour le soin des plaies

Droite ≠ Gauche



Semelle intérieure amovible



Pour les diabétiques



Poids plume



10 %
plus légère*



Possibilité
d'ouverture
large



**Semelles Fully
Rocker** design






Matériau extérieur
modifiable



Semelle extérieure
en EVA
**amortissante
+ antidérapante**

Découpe du matériau extérieur

Pour une décharge ciblée dans la zone dorso-médiale ou latérale du pied, il est possible de retirer la couche de cuir artificiel externe de la partie supérieure de la chaussure au niveau de la plaie. Le matériau souple en Plastazote® de la chaussure intérieure reste intact.

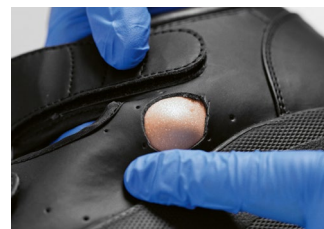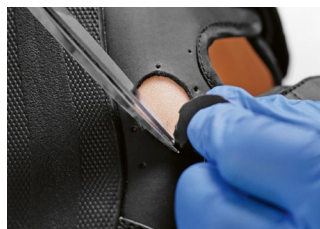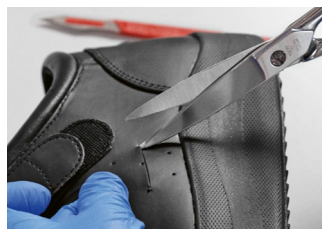

Indications

- Pour le traitement du syndrome du pied diabétique
- Pour la cicatrisation des plaies ouvertes et des ulcères en charge
- Pour la décharge de la pression
- En phase postopératoire, après des interventions chirurgicales des orteils et / ou de l'avant-pied
- Ulcérations jusqu'au stade 3 de Wagner
- Protubérances osseuses

WCS® Light

Chaussure fermée pour le soin des plaies

Droite ≠ Gauche



Semelle intérieure amovible



Pour les diabétiques



Poids plume



Disponible uniquement en paire

10%
plus légère*



Matériau extérieur
**extensible +
perméable à l'air**



**Semelles Fully
Rocker design**



Semelle extérieure
en EVA
**amortissante
+ antidérapante**

Dès le stade initial du pied diabétique, c'est-à-dire en cas d'ulcère léger, le patient diabétique bénéficie d'une chaussure sûre et confortable assurant la répartition nécessaire de la pression et pouvant être portée à l'intérieur comme à l'extérieur.

Indications

- Pour le traitement du syndrome du pied diabétique
- Pour la cicatrisation des plaies ouvertes et ulcères légers
- Pour la décharge de la pression
- En phase postopératoire, après des interventions chirurgicales des orteils et / ou de l'avant-pied



Tailles + dimensions

Taille	Pointure	Semelle			Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
		A	B	C			
					Droite	Gauche	Pair
XS	35 – 36	22,5	9,1	6,1	DAR.WCS0B/R	DAR.WCS0B/L	DAR.WCSL/0
S	37 – 38	25,2	10,1	6,8	DAR.WCS1B/R	DAR.WCS1B/L	DAR.WCSL/1
S/M	39 – 40	26,1	10,4	6,9	DAR.WCS7B/R	DAR.WCS7B/L	DAR.WCSL/7
M	41 – 42	27,2	10,6	7,0	DAR.WCS2B/R	DAR.WCS2B/L	DAR.WCSL/2
L	43 – 44	28,5	11,0	7,3	DAR.WCS3B/R	DAR.WCS3B/L	DAR.WCSL/3
XL	45 – 46	30,5	11,3	7,4	DAR.WCS4B/R	DAR.WCS4B/L	DAR.WCSL/4
XXL	47 – 48	31,9	11,4	7,7	DAR.WCS5B/R	DAR.WCS5B/L	DAR.WCSL/5



Toutes les dimensions sont indiquées en cm et correspondent à la taille de la semelle intérieure. Les pointures de chaussure sont à titre indicatif. Le choix de la pointure dépend essentiellement du volume du pansement correspondant.

Produits combinés

WCS® / WCS® Light Insoles

Système de semelle à 4 couches

WCS®

En compensation de la hauteur pour la WCS®

TwinShoe®

Chaussure de compensation de la hauteur pour la WCS®

*10 % plus légère que le modèle précédent en taille M.

Représentant officiel de DARCO en Suisse

Orthopartner AG | Lenzburgerstrasse 2 | Gebäude 10 | 5702 Niederlenz
Tel. +41 (0) 62 769 88 00 | www.orthopartner.ch | info@orthopartner.ch

 **orthopartner ag**
Ärzte- und Spitalbedarf



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de/fr



3.05.F.01_DARCO_ WCS®/WCS®_Light