



Gesundheit braucht Vertrauen

Ergänzung Handrehabilitation

Neuer Webshop
mit über 2'000 Artikeln
www.orthopartner.ch

Isotoner Handschuh



100 %
latexfrei

Indikation

Oedembehandlung, Narbenbehandlung

Funktion


Druckhandschuh der sanften Druck von 23 - 32 mm HG ausübt (KKL II).
Offene Finger zur Erhaltung der Funktionalität.

Plus

- Material: 80 % Nylon, 20 % Spandex, Latexfrei
- Elastizität in zwei Richtungen ermöglicht eine gleichmässige Druckverhältnisse
- Alle Nähte auf Aussenseite für mehr Komfort und Vermeidung von Druckstellen
- Erzeugt einen Druck von ca. 23 - 32 mm HG, gemessen am Umfang des MP Gelenks
- Waschbar in Waschmaschine mit kaltem Wasser im Schongang (an der Luft trocknen)
- Unisex für Damen und Herren
- Zwei Varianten erhältlich: Mit offenen oder geschlossenen Fingern

Art.-Nr. offene Finger	Art.-Nr. geschlossene Finger	Variante	Grösse	Einheit
A5511	A5711	Offene/geschlossene Finger	X-Small	Paar
A55111	A57111	Offene/geschlossene Finger	X-Small	Linker Handschuh
A55112	A57112	Offene/geschlossene Finger	X-Small	Rechter Handschuh
A5512	A5712	Offene/geschlossene Finger	Small	Paar
A55121	A57121	Offene/geschlossene Finger	Small	Linker Handschuh
A55122	A57122	Offene/geschlossene Finger	Small	Rechter Handschuh
A5513	A5713	Offene/geschlossene Finger	Medium	Paar
A55131	A57131	Offene/geschlossene Finger	Medium	Linker Handschuh
A55132	A57132	Offene/geschlossene Finger	Medium	Rechter Handschuh
A5514	A5714	Offene/geschlossene Finger	Large	Paar
A55141	A57141	Offene/geschlossene Finger	Large	Linker Handschuh
A55142	A57142	Offene/geschlossene Finger	Large	Rechter Handschuh

Finger Winkelmesser

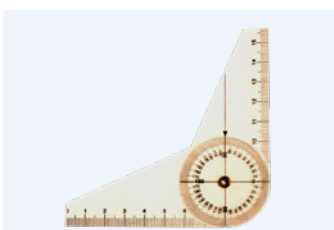


Material

Polycarbonat

Art.-Nr.	Bezeichnung
950001	Winkelmesser, Transparent, 102 x 45 x 1.0 mm

Veloursband und Mikrohakenband

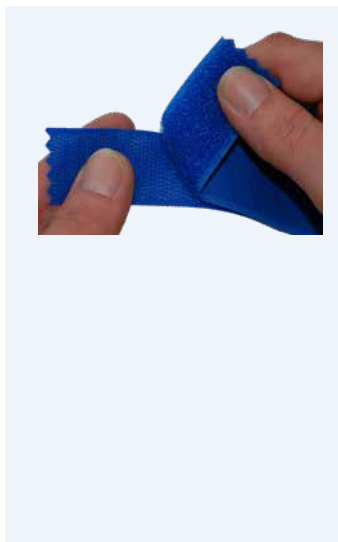

Funktion

Ermöglicht vielfaches Öffnen und Schliessen ohne Verlust der Haftkraft.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
F2525LBW	Veloursband eingefasst, 25 mm x 20 m	Blau
F2525LSW	Veloursband eingefasst, 25 mm x 20 m	Schwarz
F5025LBW	Veloursband eingefasst, 50 mm x 20 m	Blau
F5025LSW	Veloursband eingefasst, 50 mm x 20 m	Schwarz
F5025LJB	Veloursband Standard, 50 mm x 25 m	Blau
F5025LJS	Veloursband Standard, 50 mm x 25 m	Schwarz
F2525LJB	Veloursband Standard, 25 mm x 25 m	Blau
F2525LJS	Veloursband Standard, 25 mm x 25 m	Schwarz

Mikrohakenband – Low profile Einsatz in Schienen zum Befestigen der Polster

F866 2025HWK	Mikrohakenband selbstklebend, 20 mm x 25 m
F866 5025HNK	Mikrohakenband selbstklebend, 50 mm x 25 m

Back to Back



Funktion

Zur Verlängerung der Tragedauer von Bandagen.

Plus

Doppelseitiges Haken-Flauschband.

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5010BTB	Haken/Flauschband, doppelseitig, schwarz, 5 cm x 10 m

Verschlussband mit D-Ring



Funktion

Zum Verschliessen von gespaltenen Kunststoffapplikationen oder Lagerungsschienen.

Plus

Das rückseitige Flauschband beim D-Ring ermöglicht das Befestigen des Bandes an der Schiene mittels selbstklebendem Klettbandstück.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
F10125300	Verschlussband mit D-Ring 2.5 x 30 cm	10 Stk.
F10125360	Verschlussband mit D-Ring 2.5 x 36 cm	10 Stk.
F10125480	Verschlussband mit D-Ring 2.5 x 48 cm	10 Stk.
F10125630	Verschlussband mit D-Ring 2.5 x 63 cm	10 Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Digi Strap Basic



Funktion

Digi Strap Basic dient zur funktionellen Klettfixierung eines oder mehrerer Finger in einer bestimmten Position. Die Polsterung ermöglicht ein angenehmes Tragen und verhindert ein allfälliges Rutschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
1001OP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, blau, ohne Polster	10 Stk.
1005OP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, blau, ohne Polster	50 Stk.
1001MP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, blau, mit Polster	10 Stk.
1005MP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, blau, mit Polster	50 Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Digi Strap Dig 4-5



Funktion

Dient der funktionellen Klettfixierung des vierten und fünften Fingers. Die Polsterung ermöglicht ein angenehmes Tragen und verhindert ein allfälliges Rutschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1001-45	Digi Strap Dig 4-5, blau, mit Polster	10 Stk.

Polsterstrümpfe



Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Masse
Polsterschlauch			
91 00 04	Polsterschlauch Frottée-Stretch	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	4 cm x 5 m
91 00 06	Polsterschlauch Frottée-Stretch	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	6 cm x 10 m
91 00 21	Hand/Armpolster Frottée-Stretch	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	35 cm

Trikotschlauch			
91 15 71	Trikotschlauch Universal	100 % ungebleichte Baumwolle, Farbe: crème	4.5 cm x 10 m
91 10 45	Hand/Armtrikot mit Daumen, Universal	100 % ungebleichte Baumwolle, Farbe: crème	45 cm
91 10 60	Hand/Armtrikot mit Daumen, Universal	100 % ungebleichte Baumwolle, Farbe: crème	60 cm

Elastischer Trikotschlauch			
91 15 75	Elastischer Strickschlauch, small	95 % Baumwolle, 5 % baumwollummanteltes Elastan (lange Lebenszeit möglich)	4 cm x 10 m

Synthetischer Strickschlauch			
90 00 02	Synthetischer Strickschlauch	Weiches Polyestergergarn, wasserabweisend	2.5 cm x 23 m
90 00 05	Synthetischer Strickschlauch	Weiches Polyestergergarn, wasserabweisend	5 cm x 23 m

Thumb Spica Splint Linter			
7444	Thumb Spica Splint Linter kurz mit Daumen 10 Stk.	Baumwolle Polyester	7.5 cm x 15 cm
744401	Thumb Spica Splint Linter Wrist/Hand	Baumwolle Polyester	7.5 cm x 33 cm
744402	Thumb Spica Splint Linter Wrist/Hand/Thumb	Baumwolle Polyester	7.5 cm x 33 cm

Vulkan Pro-Grip



Aufgrund der hohen Kompression auch als Verschluss geeignet.

- Material: 80 % Baumwolle, 12 % Elastan, 8 % Polyamide
- Waschbar bei 20 °C (Handwäsche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Umfang
09 126 7723	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage A	4.2 cm x 10 m	10 cm - 12 cm
09 126 7798	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage B	6.25 cm x 10 m	12 cm - 14 cm
09 126 7814	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage C	6.72 cm x 10 m	15 cm - 25 cm
09 126 7830	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage D	7 cm x 10 m	26 cm - 35 cm
09 126 7848	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage E	8.75 cm x 10 m	36 cm - 45 cm
09 126 7863	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage F	10 cm x 10 m	45 cm - 50 cm
09 126 7889	Vulkan Pro-Grip Tubular Bandage G	12 cm x 10 m	51 cm - 60 cm

Medicool Khlspray



Indikation

- Sofortige Schmerzlinderung bei Prellungen und stumpfen Verletzungen.
- Khlt schnell und wirkt angenehm erfrischend.
- Wird zur Abkhlung von Schienen verwendet.
- Punktgenaues Sprhen mglich

Art.-Nr.	Bezeichnung
600-100	Medicool Khlspray 300 ml

Rol-Flex selbsthaftende elastische Binde




Diese selbsthaftende Binde mit hoher Qualitt bietet Kompression und Untersttzung. Sie kann zur Sicherung von Verbnden und Orthesen verwendet werden und haftet nur auf sich selbst, nicht auf der Haut. Die Binde ist rutschfest mit gleichbleibendem Druck und bietet sicheren Sitz ohne Klammern, auch bei grsseren Aktivitten. (Enthlt Latex)

Plus

- Leicht und khl; Unsteril

Art.-Nr. Hautfarbe	Art.-Nr. Weiss	Art.-Nr. Blau	Art.-Nr. Rot	VPE*	Masse
A93611	A93621	A93631	A93641	30 Rollen	2.5 cm x 4.6 m
929891	-	929893	-	48 Rollen	3.8 cm x 4.6 m
-	-	A93632	A93642	36 Rollen	5.1 cm x 4.6 m
A93613	-	-	-	24 Rollen	7.6 cm x 4.6 m
-	-	A93634	-	18 Rollen	10.2 cm x 4.6 m

X-LITE® PLUS (bisheriger Name C-LITE)

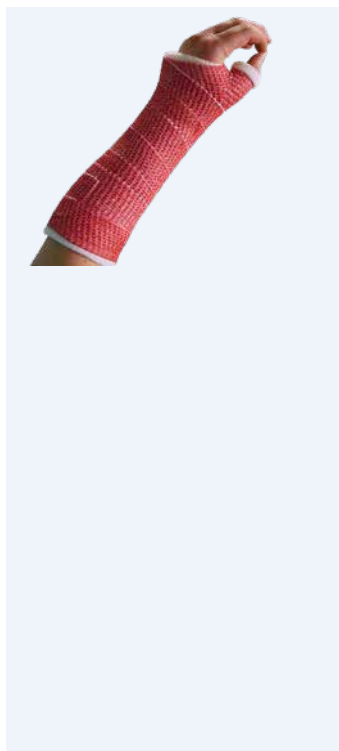

Namensnderung – Das Material bleibt unverndert.

Plus

- Extrem leicht und luftig
- Die Oberflche wird als sehr angenehm empfunden.
- Das Material schmiegt sich an die Konturen der Hand an.
- Kann zweilagig verarbeitet werden. Dadurch werden die Schienen usserst stabil.
- Atmungsaktiv; Verhindert Schwitzen

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Masse
VPE 1 Stk.	VPE 5 Stk.	VPE 10 Stk.	VPE 20 Stk.		
64701-1	64701-5	-	-	Weiss	2.5 cm x 1.8 m
64711-1	64711-5	-	-	Rot	2.5 cm x 1.8 m
64721-1	64721-5	-	-	Blau	2.5 cm x 1.8 m
64731-1	64731-5	-	-	Schwarz	2.5 cm x 1.8 m
64741-1	64741-5	-	-	Hot Pink	2.5 cm x 1.8 m
64723-1	-	-	64723-20	Blau	7.5 cm x 1.8 m
64707-1	-	64707-10	-	Weiss	15 cm x 1.8 m
64717-1	-	64717-10	-	Rot	15 cm x 1.8 m
64727-1	-	64727-10	-	Blau	15 cm x 1.8 m
64737-1	-	64737-10	-	Schwarz	15 cm x 1.8 m
64747-1	-	64747-10	-	Hot Pink	15 cm x 1.8 m

X-LITE® Hakenband

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	VPE*
64195-5	X-LITE Hakenband mit Thermoplastkleber	5 cm x 50 cm	5 Stk.
64196-1	X-LITE Hakenband mit Thermoplastkleber	5 cm x 500 cm	Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Rolyan Quick Cast 2



Funktion

Das perfekte thermoplastische Tape zum Schienen oder Gipsen von Fingern. Es kann direkt auf der Haut des Patienten angepasst werden. Quick Cast 2 passt schneller als Gipsmaterial und benötigt kein Unterziehmaterial.

Indikation


Arthritis; Reduzierung von Oedemen; Mallet Finger; Daumenschienen; Jegliche Art der Stabilisation und Immobilisation der Finger.

Plus

- Polymer Tape
- Memory-Effekt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse
09 153 2803	Rolyan Quick Cast Box	2.5 cm x 3.7 m

Thermoplaste – Klarity KS

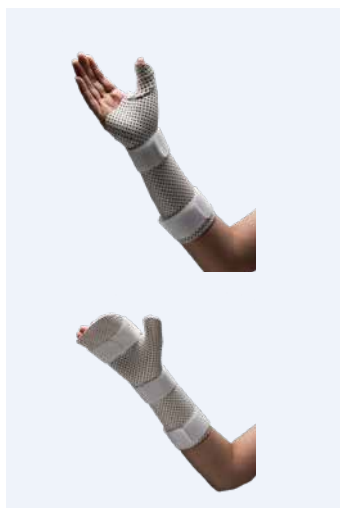

Material und Verhalten

Passgenau und stark perforiert. Lässt sich einfach und detailgenau anpassen und bleibt in der angebrachten Form. Sehr gute Stabilität.

Verarbeitung


Verklebt mit sich selbst. Wassertemperatur 70 °C
Angeschnittene Löcher an der Kante lassen sich einfach verstreichen.

Plus

- Kein Material ohne Memory hat eine so grosse Perforation.
- Hohe Passgenauigkeit, ohne Fingerabdrücke.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
KS3219	Klarity KS 46 cm x 61 cm, weiss, 19 % perforiert, 3.2 mm	Stk.
KS3219-4	Klarity KS 46 cm x 61 cm, weiss, 19 % perforiert, 3.2 mm	4 Stk.

Thermoplaste – B-Cast

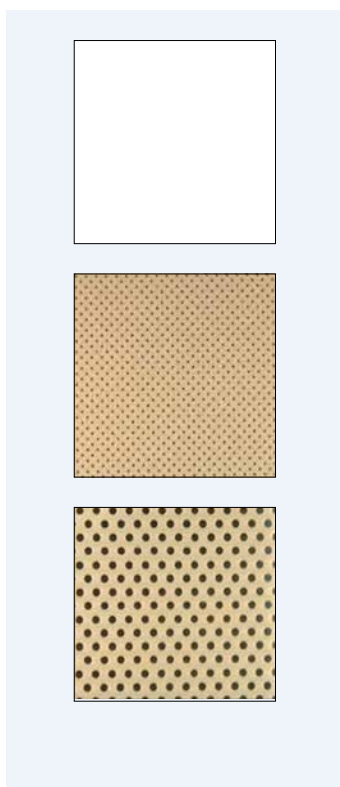

Material und Verhalten

Glatt und multi- oder microperforiert. Material mit langsamen Memory. Sehr leicht formbar. Bleibt schnell in der Form. Lässt sich beim Verarbeiten stark ziehen.

Verarbeitung


Verklebt mit sich selbst, eventuell mit Föhn zusätzlich aufheizen. Wassertemperatur 70 °C. Angeschnittene Löcher an der Kante lassen sich einfach verstreichen. Misslingt die Anpassung, zurück ins Wasser legen. Das Material geht langsam in seine Grundform zurück.

Plus

- Memory-Material, fühlt sich an wie Polyform oder Ezeform.
- Hohe Passgenauigkeit ohne Fingerabdrücke.
- Gut geeignet für Personen mit wenig Routine.

Art.-Nr.	Bezeichnung
32045	B-CAST, 60 x 45 cm, glatt, 3.2 mm
32090	B-CAST, 60 x 90 cm, glatt, 3.2 mm
32345	B-CAST, 60 x 45 cm, multiperforiert, 3.2 mm
32390	B-CAST, 60 x 90 cm, weiss, multiperforiert, 3.2 mm
16145S	B-CAST, 60 x 45 cm, beige, microperforiert, 1.6 mm
20145	B-CAST, 60 x 45 cm, weiss, microperforiert, 2 mm
20345	B-CAST, 60 x 45 cm, weiss, multiperforiert, 2 mm

Thermoplaste – Turbocast

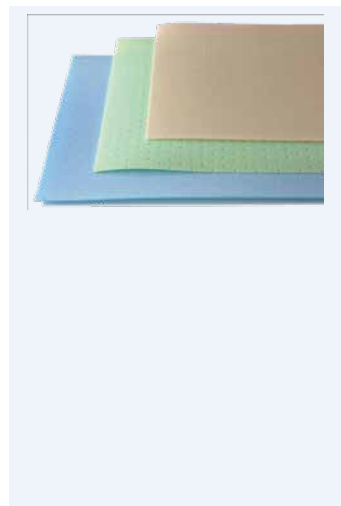

Ideal für kleine Fingerschienen. Material: Dünn und beschichtet

Plus

- Trägt nicht auf und ist trotzdem stabil
- Einfach in der Anwendung
- Passgenau und komfortabel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
TC0810	Turbocast 60 x 41 cm, microperforiert, 0.8 mm	Beige
TC0812	Turbocast 60 x 41 cm, microperforiert, 0.8 mm	Blau
TC1610S	Turbocast 60 x 45 cm, microperforiert, 1.6 mm	Beige
TC1612C	Turbocast 60 x 45 cm, microperforiert, 1.6 mm	Blau
TC2520	Turbocast 60 x 45 cm, microperforiert, 2.5 mm	Beige
TC2522	Turbocast 60 x 45 cm, microperforiert, 2.5 mm	Blau
TC2523	Turbocast 60 x 45 cm, microperforiert, 2.5 mm	Grün

Aquaplast-T



Die optimale Aquaplast-Kombination aus genauer Passgenauigkeit und Zugstabilität. 100 % nicht nachlassende Elastizität erlaubt wiederholtes Erhitzen und ökonomische Schienenveränderungen.

Plus

- Nach Erwärmung transparent. Ermöglicht das Erkennen von Markierungen.
- Kanten sind leicht zu begradigen
- Schienen für Hand, Handgelenk, Finger und Daumen

Perforation

Optiperforiert: 19 %

Ultraperforiert: 13 %

Temperaturen

1.6 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 30 Sekunden

2.4 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden

3.2 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden

4.8 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 - 120 Sekunden

Verarbeitungszeit

1 - 2 Minuten

2 - 3 Minuten

4 - 6 Minuten

4 - 7 Minuten

Bezeichnung	Farbe	VPE*	Dicke	Art.-Nr. Glatt	Art.-Nr. OptiPerf.	Art.-Nr. UltraPerf.
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	1.6 mm	A96240	A96254	A962541
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	1.6 mm	A96240C4	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	2 mm	091329085	-	091329093
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	2.4 mm	A96270	A96255	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	2.4 mm	A96270C4	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	3.2 mm	A96210	A96256	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	3.2 mm	A9621	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	4.8 mm	A96274	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	4.8 mm	A96274C4	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Weiss	1	3.2 mm	A96272	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Weiss	1	4.8 mm	A96275	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Weiss	2	4.8 mm	A96275C2	-	-

Bezeichnung	Farbe	VPE	Dicke	Art.-Nr. Perforiert	Perforation	Art.-Nr. SuperPerf.	Perforation
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	1.6 mm	-	-	A96250	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	2.4 mm	A962090	2 %	A96271	38 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	3.2 mm	A96230	3 %	A96220	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	3.2 mm	A96230C4	1 %	-	-

*VPE = Verpackungseinheit

Aquaplast-T Watercolors



Aquaplast Thermoplast ist das führende Material für leicht anzufertigende und haltbare Schienen für die unteren Gliedmassen (Hand, Handgelenk). In leuchtenden Farben lieferbar, um die Kooperationsbereitschaft vor allem bei Kindern zu erhöhen.

Perforation

Optiperforiert: 19 %

Ultraperforiert: 13 %

Temperaturen

1.6 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 35 Sekunden

2.4 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden

3.2 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden

Verarbeitungszeit

1 - 2 Minuten

2 - 3 Minuten

4 - 6 Minuten

Bezeichnung	Farbe	VPE*	Dicke	Art.-Nr. Glatt	Art.-Nr. OptiPerf.	Art.-Nr. UltraPerf.
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Beige	1	1.6 mm	A96241	A96242	A962421
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Beige	1	2.4 mm	A96257	A96258	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Beige	1	3.2 mm	A96231	A96232	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rot	1	1.6 mm	A927953	-	A9631131
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rot	1	2.4 mm	A963112	A963113	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rot	1	3.2 mm	A963110	A963111	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rot	4	3.2 mm	091169044	091169051	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Lavendel	1	1.6 mm	551488	551490	551492
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Lavendel	1	3.2 mm	551484	551486	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Lavendel	4	3.2 mm	091182500	091182526	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violett	1	1.6 mm	A927954	-	A9631031
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violett	1	2.4 mm	A963102	A963103	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violett	1	3.2 mm	A963100	A963101	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violett	4	3.2 mm	091169069	091169077	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Blau	1	1.6 mm	550551	550553	550555
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Blau	1	3.2 mm	550547	550549	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Blitzblau	1	1.6 mm	A96340	A96346	A963461
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Blitzblau	1	2.4 mm	091544709	091544717	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Blitzblau	1	3.2 mm	A9631	A96310	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Blitzblau	4	3.2 mm	091169002	091169028	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Pastellblau	1	1.6 mm	A927955	-	A963141
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Pastellblau	1	3.2 mm	A96330	A96314	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Metallicblau	1	1.6 mm	-	-	091551613
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Metallicblau	1	2.4 mm	-	-	091521293
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Metallicblau	1	3.2 mm	091513852	091513878	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Metallicblau	4	3.2mm	091549187	091549195	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Hellgrün	1	1.6 mm	A927966	-	A963131
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Hellgrün	1	3.2 mm	A9635	A96313	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Silber	1	1.6 mm	-	-	091551647
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Silber	1	2.4 mm	-	091182492	091521301
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Silber	1	3.2 mm	091513845	091513860	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Silber	4	3.2 mm	091549161	091549179	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Schwarz	1	1.6 mm	A96323	A96324	A963241
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Schwarz	1	3.2 mm	A96332	A96321	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Schwarz	4	3.2 mm	091169010	091169036	-

*VPE = Verpackungseinheit

Erkoton 20 Silikon



Indikation

Narbenbehandlung; Stossentlastung; Korrekturen in Handschienen.

Funktion

Verminderung von Narbenbildung; Behandlung von Narben; Schutz vor Vibration; Druck- und Stossentlastung: Zur korrekten Lagerung in Handschienen.

Plus

- Gleichbleibende, einfache Herstellung durch Mischen der zwei Komponenten.
- Anwendbar auch bei konkaven Flächen wie Handinnenfläche.
- Waschbar (warmes Wasser)
- Sehr weich und anschmiegsam
- Optimaler Hautkontakt ohne Druckstellen.
- Ausgezeichnete Detailreproduktion
- Ausserordentlich stabil und hohe Elastizität.
- Lagertemperatur 20 - 25 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
413 820	Erkoton 20	2 x 100 ml Härter- und Basismasse, 2 Messlöffel, 1 Anleitung
413 825	Erkoton 20	2 x 400 ml Härter- und Basismasse, 2 Messlöffel, 1 Anleitung

*VPE = Verpackungseinheit

Heuser Wasserbad



Heuser Wasserbäder stehen für hochwertige Qualität und werden in DE produziert.

Funktion

Erwärmung und Warmhaltung von thermoplastischen Materialien.

Ausstattung

- Selbsttragendes Aussengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Deckel mit Griffstange; Hubhilfe
- Energiesparende Isolierung gegen Wärmeverluste
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperaturerfassung direkt im Wasser
- Wasserablauf mit verchromtem Kugelhahn an der Frontseite
- Herausnehmbarer Einlegerost aus Edelstahl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Innenmass	Aussenmass	Inhalt
WB-485	Wasserbad	48.5 x 35 x 13 cm	57 x 42 x 28 cm	20 Liter
WB-500	Wasserbad	50 x 30 x 20 cm	57.5 x 36.5 x 35.5 cm	30 Liter
WB-590	Wasserbad	59 x 40 x 10 cm	67.5 x 47 x 25 cm	25 Liter

Heisswasserbecken



9 Liter, Gewicht: 5 Kg



28 Liter, Gewicht: 10.8 Kg



56 Liter, Gewicht: 18.3 Kg

Diese thermostatgeregelten Becken zum Erhitzen von Schienenmaterial sind einschließlich ihrer Abdeckungen aus rostfreiem Stahl. Eingelassene, isolierte Tragegriffe erleichtern den Transport.

Plus

- Abdeckung inklusive
- 2 Jahre Garantie
- In 3 Grössen erhältlich

Becken 56 Liter

Mit zweitelliger, abnehmbarer Abdeckung, mit welcher eine Hälfte des Beckens abgedeckt werden kann, während die andere offen bleibt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Innenmass	Aussenmass	Inhalt
AA9413	Wasserbad	50 (L) x 30 (B) x 6.5 cm (H)	54 (L) x 33 (B) x 14.5 cm (H)	9 Liter
AA9403	Wasserbad	62 (L) x 50 (B) x 20 cm (H)	66 (L) x 54 (B) x 26 cm (H)	28 Liter
AA9405	Wasserbad	54 (L) x 33 (B) x 20 cm (H)	62 (L) x 50 (B) x 29 cm (H)	56 Liter

Paraffinbad® Therabath Professional



Weltweit gilt das Paraffinbad Therabath® Professional, als die erste Wahl professioneller Anbieter. Die durchdringende Wärme regt die Durchblutung an, lindert leichte Steifheit, Gelenkschmerzen und lockert Muskelverspannungen. Warmes Paraffin dient auch als Feuchtigkeitspflege für eine gesündere, weichere Haut.

Plus

- Für Dauerbetrieb geeignet
- Inklusive Deckel und Gitter
- Fassungsvermögen: 2.72 Kg
- Temperaturbereiche: 51.6 °C - 57.2 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse
AA9713A	Paraffinbad® Therabath Professional	36.2 (L) x 21.6 (B) x 19.7 cm (H)

Paraffin



Paraffin zum Nachfüllen in drei Variationen.

- Dreifach gefiltert für höchste Reinheit
- Kristallklar
- Weich, formbar und nicht schmierend

Frottée Fausthandschuhe aus 100 % Baumwolle

- Maschinenwaschbar, Klettverschluss

Plastikschutz für Hände und Füße

- Einwegmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
AA9713C	Therabath Paraffin, Wintergreen	6 Beutel à 454 g
AA9713D	Therabath Paraffin, geruchsfrei	6 Beutel à 454 g
AA9713E	Therabath Paraffin, Lavendel	6 Beutel à 454 g
AA9713F	Frottée Fausthandschuh	Paar
AA9713H	Plastikschutz für Hände & Füße	100 Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Rolyan Ultigrip Finger Exerciser



Verbessert die Rehabilitation. Kräftigt jeden Finger individuell. Trainiert die ganze Hand und den Unterarm. Erhältlich in verschiedenen Stärken.

- Grosse Tastengriffe
- Individuelle Beugung einzelner Finger
- Daumen-Druck-Funktion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Griffstärke	Farbe
091550409	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	0.68 Kg	Gelb
091550417	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	1.40 Kg	Rot
091550425	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	2.30 Kg	Grün
091550433	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	3.20 Kg	Blau
091550441	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	4.10 Kg	Schwarz

Rolyan Ultigrip Hand Exerciser



Stärkt individuell die Entwicklung der Finger- und Handkraft, verbessert die Flexibilität und die Koordination. Trainiert die ganze Hand und den Unterarm.

- Handgriff mit 4 Einzelrollen (rot)
- Handgriff fix (grün)
- Handgriff mit Schaumstoffpolster (gelb)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
091550367	Rolyan Ultigrip Hand Exerciser; Handgriff fix	Grün
091550359	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser; 4 Fingerrollen	Rot
091550383	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser; Handgriff rollend	Gelb
091550391	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser; Set mit 3 Handgriffen	-

Mini Massager



Der kleine, kompakte, aber kraftvolle Massager verfügt über drei Massageköpfe zur punktuellen Massage gezielter Bereiche. Zur Massage grösserer Bereiche kann der Deckel auf dem Massager belassen werden.

- Vibriert mit einer Frequenz von ca. 5'500 Schwingungen pro Minute.
- Inklusive Batterie

Art.-Nr.	Bezeichnung
AA9200A	Mini Massager

Igelbälle



Für Handtraining und Massage. Igelbälle aktivieren durch Kreisen auf der Haut die unterschiedlichen Reflexzonen des Körpers und steigern so Wohlbefinden und Entspannung. Wählen Sie die Grösse des Balles individuell, je nach Handgrösse oder Anwendungsgebiet.

Art.-Nr.	Diameter	Farbe
AA90003A	6 cm	Orange
AA90003B	7 cm	Grün
AA90003C	8 cm	Gelb
AA90003D	9 cm	Rot
AA90003E	10 cm	Blau

MECRON Elastic Tape und Elastic Tape Strong



Mengen-
rabatt

Menge	Rabatt
6 Rollen	7 %
12 Rollen	13 %
24 Rollen	19 %
36 Rollen	23 %
48 Rollen	27 %
60 Rollen	30 %

Elastisches Sport- und Therapietape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie.

- Gegen Muskelbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation
- Stimulation der Nervenbahnen
- Förderung des Blutkreislaufes
- Stärkung der Muskeln und Sehnen
- Elastisch und zu 30 % dehnbar
- Elastic Tape Strong mit sehr hoher Klebkraft speziell für Sportler

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge
4300-300	Mecron Elastic Tape	Blau	5 cm	5 m
4300-400	Mecron Elastic Tape	Rot	5 cm	5 m
4300-500	Mecron Elastic Tape	Schwarz	5 cm	5 m
4300-600	Mecron Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
4300-700	Mecron Elastic Tape	Gelb	5 cm	5 m
4300X-800	Mecron Elastic Tape Strong	Pink	5 cm	5 m
4300X-900	Mecron Elastic Tape Strong	Türkis	5 cm	5 m

MECRON Standard Tape



Ein Sporttape zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln oder als Alternative zu Bandagen.

- Unelastisch
- Kann individuell den Gegebenheiten, wie Sportart, Verletzungsrisiko und Physiognomie des Trägers angepasst werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
4300-100	MECRON Standard Tape, weiss	3.8 cm x 10 m

MECRON Unterzugsbinden




Unterzugsbinden bei Verbänden oder Tapes.

- Fixierung von Gipsen und Verbänden
- Hautfreundlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Farbe
4300-070	MECRON Underwrap	8 cm x 4 m	Hautfarbe
4300-080	MECRON Underwrap	8 cm x 20 m	Hautfarbe
4300-200	MECRON Pre-Tape Schaumstoff-Unterzugbinde	7 cm x 27 m	Hautfarbe

MECRON X-Patch Gitter-Tape

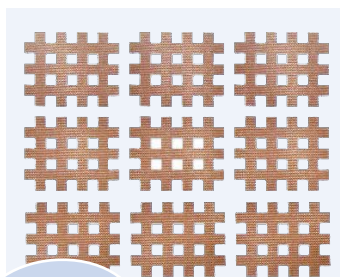


100 %
latexfrei

Das MECRON X-Patch eignet sich zur Behandlung von Schmerz- und Triggerpunkten sowie von Akupunkturbahnen. Auch Verklebungen der Faszien unter Narben werden gelöst.

- Wasserresistent
- Kann mehrere Tage ohne Einschränkungen getragen werden
- Keinerlei Wirkstoffe
- Aus unelastischem Nylongewebe mit einer Acrylklebmasse beschichtet
- In drei Grössen à je 20 Blatt erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Verpackung
4300-202	DARCO Gitter-Tape beige	5.2 x 4.5 cm	20 Blatt à 2 Tapes
4300-209	DARCO Gitter-Tape beige	2.8 x 2.1 cm	20 Blatt à 9 Tapes
4300-206	DARCO Gitter-Tape beige	3.5 x 2.5 cm	20 Blatt à 6 Tapes

B&L Hydraulischer Handkraftmesser

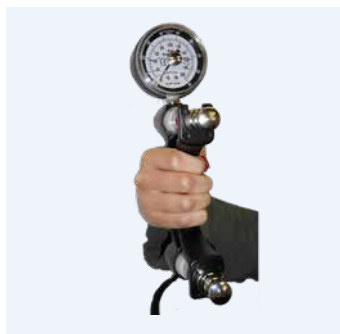

Gerät zur Messung der Griffstärke (Greifkraft) der Hand. Der verstellbare Griff kann auf 5 Griffpositionen eingestellt werden, um den Griffraum von 3.5 cm bis auf 8.6 cm zu vergrössern. Der maximale Anzeigewert für Greifkraft beträgt 90 Kg.

- Mit Normwerten für Erwachsene und Kinder
- Offiziell zertifizierte Kalibrierung
- 2 Jahre Herstellergarantie; Inkl. Tragekoffer

Art.-Nr.	Bezeichnung
BL5001	B&L Hydraulischer Handkraftmesser

B&L 3 Piece Hand Evaluation Set



Kompletter Instrumentensatz zur Bewertung der Hand. Das Set beinhaltet:

- 1x Hydraulischer Handkraftmesser
- 1x Fingerschlussmessgerät
- 1x 5.5" Finger Goniometer aus rostfreiem Stahl

Plus

- Offiziell zertifizierte Kalibrierung
- 2 Jahre Herstellergarantie; Inkl. Tragekoffer

Art.-Nr.	Bezeichnung
BL5011-3	B&L 3 Piece Hand Evaluation Set

B&L Fingerschlussmessgerät



Präzisionsgerät, das den anerkannten Standard zur isometrischen Messung der Spannkraft der Fingerspitzenmuskeln, der Fingermuskeln und der Innenhandmuskeln darstellt.

- Empfehlung für die Messung schwacher Hände: Artikel A8533 und A8531
- Empfehlung für Kraftaufbauprogramme: Artikel A8532

Plus

- Offiziell zertifizierte Kalibrierung; Skala in Kilogramm und Pounds
- Mit Fingerschluss-Normwerten für Erwachsene
- 2 Jahre Herstellergarantie; Inkl. Tragekoffer

Art.-Nr.	Bezeichnung
A8533	B&L Fingerschlussmessgerät, 0 - 4.5 Kg
A8531	B&L Fingerschlussmessgerät, 0 - 13.6 Kg
A8532	B&L Fingerschlussmessgerät, 0 - 27 Kg

Aesthesio Monofilamentfäden



Sensor zum Testen der Hautsensibilität und zur Bestimmung der peripheren Nerven-einflüsse.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
514000-5C	Set mit 5 Aesthesio Monofilamentfäden: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	Set
514000-6C	Set mit 6 Aesthesio Monofilamentfäden: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65	Set
514000-20C	Set mit 20 Aesthesio Monofilamentfäden	Set
	Ersatzfäden in verschiedenen Grössen	Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.

Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

1.16.D.02_Handreha (11.2018)

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Oholten 11 · 5703 Seon

www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

